

VAC005005 Vacutex™, förband med snabb kapillärverkan, 5 x 5 cm, 2x2 inch
 VAC010010 Vacutex™, förband med snabb kapillärverkan, 10x10cm, 4x4 inch
 VAC010015 Vacutex™, förband med snabb kapillärverkan, 10x15cm, 4x6 inch
 VAC010020 Vacutex™, förband med snabb kapillärverkan, 10x20cm, 4x8 inch
 VAC010100 Vacutex™ rulle, förband med snabb kapillärverkan, 10x100cm, 4x40 inch
 VAC001040 Vacutex™ dränering, förband med snabbkapillär verkan, 1x40cm, 0.4x16 inch

Underlättar läkningen genom förbättrade syrenivåer och en minskning av mängden exsudat och ödem i och runt svåråta sår

Avsedd användning

Vacutex™ förband med snabb kapillärverkan och dränering där syftet är att snabbt behandla måttligt till kraftigt utsöndrande sår, sår med tjocka häftande sårskorpor, djupa oregelbundna eller kraterbildande sår eller sår som är svåra att nå, inklusive skorpiga sår, nekrotiska sår samt kavitet/-sinussår.

Kliniska indikationer för Vacutex™ är diabetiska sår, venösa bensår, trycksår och akuta eller kirurgiska sår med ödembesvär.

Beskrivningar

Vacutex™ förband med snabb kapillärverkan är konstruerade med en blandning av tre lager med polyester och bomullelement som har vävts samman enligt patenterade specifikationer. Vacutex™ drar loss och absorberar sårskorpor, nekrosvävnad och exsudat från såret till förbandets mellersta lager. När det mellersta lagret är mättat, förs överflödigt vätska från såret till det tredje lagret. Vacutex™ främjar en snabb kapillärverkan vid sårkontakt, och kommer på ett effektivt sätt att lyfta, transportera och avlägsna överflödigt sårexsudat/mellanrumsvätskor från sårytan. Vacutex™ fungerar genom att dra bort och transportera (bakteriefyllt) exsudat från sårytan, vilket lämnar tillfälle för såret att läka inifrån. Det är ett enkelt, unikt och innovativt första sår förband som täcker såret, med insättbarhet över ett brett spektrum av sår.

Kliniska vinster

Kapillärt verkande förband är synnerligen användbara vid sår med måttligt eller väldigt mycket exsudat där sårskorpan kan vara tjock och oljig. I dessa fall finns det ett behov att avlägsna överflödigt sårsvätska eller exsudat från såret medan lämplig fukthalt för sår läkningen bibehålls. Sår med oregelbunden form, sår som är djupa, urholkade eller belägna på svårbehandlade platser på kroppen kan vara svårare att behandla. Vacutex™ kombinerar både en flerriktad accelererad kapillärverkan och en dränerande verkan för behandling av svåråta sår med måttligt eller kraftigt exsudat och sårsvätska.

Kontraindikationer

Använd inte på artärblödningar, dynamiska vaskulära hudgenomträngande sår eller sår som blöder väldigt mycket.

Vid väldigt infekterade sår, utför en noggrann antimikrobisk behandling innan du applicerar Vacutex™ på såret.

Varningar och försiktighetsåtgärde

- Vacutex™ bör inte användas direkt på torra nekrotiska sår och på sår med lite exsudat eftersom det i dessa fall kan häfta sig i sårytan och då är dess egenskaper som kapillärt verkande transport inte relevanta för sårets fukthalt.
- Vacutex™ bör inte användas i kombination med tjocka Vaselinbaserade geler eller förband då dessa substanser kommer att blockera de mikrokapillära kanalerna.
- Vid sår där ben eller senor har blottlagts ska du vara extremt varsam när ni använder

Vacutex™ och använda ett icke-häftande kontaktlager.

- Använd aldrig ocklusivförband eller ocklusivfilm på Vacutex™ förband då det kommer att orsaka maceration runt såret.
- Den rekommenderade användningsfristen för ett förband uppgår till tre dagar.
- Förbandet innehåller inga tillsatser (eller nanopartiklar) eller läkemedel och orsakar inga kända motreaktioner.

Användningsprocess

- Vacutex™ kan appliceras med vardera sida uppåt.
- Det finns ingen rätt eller fel sida.
- När förbandet kommer i kontakt med exsudatet i såret blir Vacutex™ enkelriktat.
- Flera lager kan appliceras beroende på sårets djup och mängden exsudat.
- Direktkontakt med sårytan är avgörande.
- Det kan klippas och formas för att passa de exakta behoven av varje sår.
- Använd alltid en vass sax för att klippa, klipp sedan till formatet så att det passar sårytan, med ett utrymme av 2 till 3 mm mellan förbandskanten och såravgränsningen.
- För djupare sår, stapla tillräckligt med lager av Vacutex™ på varandra för att komma upp till nivån för omliggande hud.
- Täck sedan över med ett sista lager Vacutex™ över hela sårområdet och med överlapp av såravgränsningen.
- Fixera med ett enkelt, icke-ocklusivt fästförband.
- Beroende på hur fuktigt såret är, placera ett (super)absorberande förband på Vacutex™-förbandet för att samla exsudatet.
- När det (super)absorberande förbandet är mättat, applicera ett nytt uppe på Vacutex™-förbandet, varvid du lämnar Vacutex™-förbandet på plats i högst 3 dagar.
- Använd aldrig icke-häftande sårkontaktlager eller en kräm med partikel-Vaselin eller fettinnehåll eftersom dessa kan försluta de kapillära kanalerna i förbandet och således minska funktionaliteten.
- Där det finns infektioner i djupa sår kommer den snabba kapillära verkan att bidra till att avlägsna infektionen ur den djupa vävnaden.
- Initialt kan det leda till vad som ser ut som en större såryta.
- Allt eftersom den kapillära verkan fortgår, kommer dock sårytans utseende att förbättra.
- Kombiner Vacutex™ alltid med en antimikrobisk behandling för infekterade sår för att öka förbandets effekt.
- Meddela patienten att den kan känna en lätt dragande förnimmelse under de första dagarna efter att förbandet har applicerats på grund av förbandets starka sugförmåga.
- Fäst med ett icke-ocklusivt förband.

Snabbguide >

Motreaktioner

Kunder bör kontakta Protex Healthcare-representanter vid varje motreaktion eller allvarlig incident som inträffar i förhållande till detta medel.

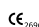
PATENTED PRODUCT VCSTIFUA.002
 december 2023

Protex Healthcare NV,
 Blommestraat 2,
 8800 Roeselare, Belgium
 www.protexhealthcare.com
 info@protexhealthcare.com

 Tillverkare

 Mängd

 Katalognummer

 CE-märkning

 Partinummer

 Medicinskt medel

 Använd före-datum

 Varning

 Tillverkningsdatum

 Läs instruktionerna innan användning



Skydda mot solljus



Återanvänd inte



Håll torrt



Steriliserad genom Gamma-strålning



Återsteriliseras inte



Använd inte om förpackningen har skadats

0°C  +30°C

Temperaturförhållanden för förvaring
 Förvara mellan 0 och 30 °C

-30°C  +60°C

Shipping and transport conditions
 Transporttemperatur mellan -30 och +60 °C